

EQUIFit bringt Sie ins Gleichgewicht

EQUIFit ist ein einzigartiges Biofeedbacksystem. Es ermöglicht Betroffenen jeden Alters eine gezielte Schwindeltherapie in den eigenen vier Wänden: selbstbestimmt, ohne Medikamente und nichtinvasiv.



Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. Schwindeltraining medizinisch empfohlen*



Unterstützt intuitive Lernprozesse im Gehirn



Einfache Bedienung per Gestensteuerung




Misst den Schwindel dort, wo er entsteht



*Leitlinie: Schwindel, akut in der Hausarztpraxis - 053 - 018

Auswertung der Ergebnisse

EQUIFit gibt während des Trainings Rückmeldung zum Trainingsergebnis. Dieses lässt sich am PC im Zeitverlauf auch grafisch darstellen.

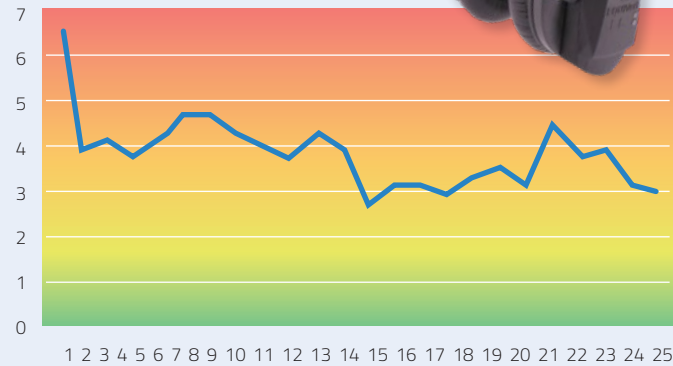

EQUIVert GmbH & Co. KG
Pastoratsstrasse 3
53809 Ruppichteroth-Winterscheid
M: info@equivert.de

www.equivert.de

Bei Fragen zum Produkt: +49 (0) 2247 9219-51

Entwickelt und hergestellt
in Deutschland



EQUIFit ist ein zugelassenes Medizinprodukt
Eine Marke der GED mbH

Version 1.3



EQUIFit[®]


Die Innovation bei SCHWINDEL
und Gangunsicherheit –
für das Training zuhause



www.equivert.de

Wem hilft EQUIFit?

Schwindel ist keine Krankheit. Er ist ein Symptom, das eine Vielzahl von Ursachen haben kann. In den meisten Fällen wird er durch eine Störung des Gleichgewichtssystems hervorgerufen.

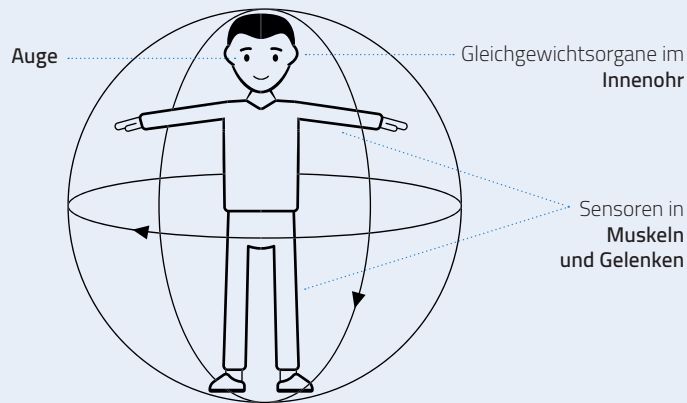

Die EQUIFit-Therapie trainiert gezielt das Zusammenspiel aller am Gleichgewicht beteiligten Sinne. So können Schwindel, Gangunsicherheiten und die Gefahr von Stürzen verringert werden.

Hinweis: EQUIFit kann sowohl bei vestibulären als auch bei anderen Schwindelarten helfen. Sollten Sie Zweifel haben, ob EQUIFit für Sie geeignet ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wie funktioniert die EQUIFit-Therapie?

EQUIFit ist sofort einsatzbereit. Sämtliche Übungen und Trainingsprogramme sind bereits vorinstalliert. Der leicht verständliche Audioguide führt durch das Training.

Sind wir im Gleichgewicht, halten wir Kopf und Körper gerade: Wir befinden uns in der Gleichgewichtslage. Der EQUIFit-Kopfhörer erfasst die Informationen, die sonst unser Innenohr erfasst: die relative Position des Kopfes und seine Bewegungen.

Hallo ich bin EQUIFit:
Ihr persönlicher
Schwindeltrainer.

Weicht der Anwender während der Übungen von der Gleichgewichtslage ab, erhält er von EQUIFit ein akustisches Feedback und kann sich so gezielt wieder in die Gleichgewichtslage bringen.

EQUIFit passt die Übungen dynamisch an den Trainingsfortschritt an – so trainieren Sie jederzeit sicher und effizient.

Was ist Biofeedback?

Im menschlichen Körper laufen zahllose Regulationsvorgänge unbewusst ab. Biofeedback macht diese Vorgänge wahrnehmbar. Dadurch kann der Nutzer bewusst auf sonst unbewusste Körperfunktionen einwirken.

Gehen Sie für die folgende Übung mit geöffneten Augen auf der Stelle. Versuchen Sie dabei eine gerade Position zu halten.

