




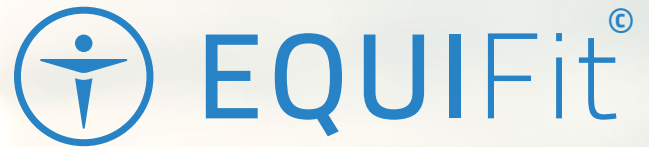
Bei Fragen zum Produkt und seiner Verwendung erreichen Sie uns per E-Mail unter info@equivert.de, oder telefonisch Mo. – Fr. 09:00 – 15:00 Uhr unter **02247 9219-53**

 GED Gesellschaft für Elektronik und Design mbH
Pastoratsstrasse 3
53809 Ruppichteroth-Winterscheid
F: +49 (0) 2247 9219-51
M: info@equivert.de

www.equivert.de



Gebrauchsanweisung beachten | **Version 1.0**



Kurzanleitung



www.equivert.de

Einschalten

Zum Einschalten wird der **Taster am unteren Ende der linken Ohrmuschel** betätigt. Die LEDs blinken abwechselnd rot und grün, dann dauerhaft grün. Setzen Sie den Kopfhörer gerade und richtig herum (**R/I**) auf.



Abschalten

Zum Abschalten legen Sie das Gerät einfach beiseite und schließen Sie es an das Ladekabel an.

Signalleuchten/LEDs

grün = betriebsbereit
rot = Fehler
rot blinkend = Gerät lädt

Bedienung Ja/Nein/Überspringen

Nicken: Ja bzw. bestätigen; Ansage überspringen



Kopfschütteln: Nein bzw. wiederholen



Lautstärke einstellen

1 x klopfen linke Seite = leiser
2 x klopfen linke Seite = lauter

Nur möglich bei laufender Übung/
im Einstellungsdialog.



Laden

Um sicherzustellen, dass das EQUIFit stets einsatzbereit ist, sollte es regelmäßig mit dem dazugehörigen Netzteil geladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED. Sobald die Akkus vollgeladen sind, leuchtet die grüne LED dauerhaft. Nach jedem Laden ist die Öffnung für den Anschluss des Ladekabels wieder zu verschließen.



Neustart

Das Gerät **kurz kopfüber halten** und sofort zurück drehen. Das Gerät startet neu, alle Einstellungen bleiben erhalten. Es kann sofort verwendet werden.



Zurückstellen/Reset

Das Gerät **kopfüber halten**. 3 Sekunden warten, es ertönt ein **Signalton**. Zurück drehen. Das Gerät ist nun vollständig zurückgesetzt und kann sofort wieder verwendet werden.

